


Batterij

We leveren de Botgroeistimulator met een oplaadbare batterij en een oplader. Sluit de batterij aan op de patiënt-unit. Wilt u 's nachts de behandeling met de Botgroeistimulator voortzetten? Zorg dat u een volledig opgeladen batterij gebruikt. Daarmee voorkomt u dat u in uw nachtrust wordt gestoord.

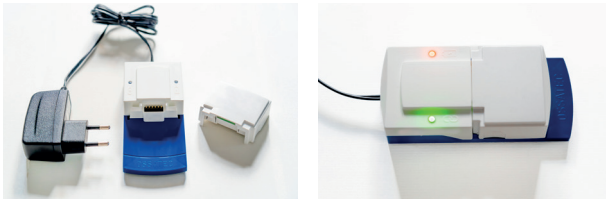

Adapter, oplader en batterij Batterij op de oplader

Batterij opladen

Steek de adapter van de oplader in het stopcontact en klik een batterij op de oplader. Het groene ledlampje gaat nu branden. Als de batterij aan het opladen is, brandt ook het oranje ledlampje. Is dat lampje uit? Dan is de batterij helemaal opgeladen.


De Botgroeistimulator bestaat uit een patiëntunit met spoel, een batterij en een oplader.

Na afloop van uw behandeling kunt u de spoel weggooien. Lever alle andere onderdelen van de set in bij het ziekenhuis. Of stuur ze terug naar:


OssaTechnics BV
Antwoordnummer 123
5400 VB UDEN

U hoeft geen verzendkosten te betalen.

CE 0344


 OssaTechnics BV and is in compliance with the Medical Device 93/42/EEC. OssaTechnics BV is ISO 13485 certified Directive.

Batterij aankoppelen of vervangen

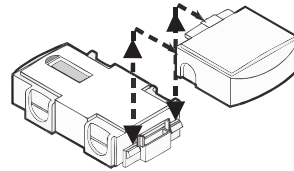

1. **Aansluiten:** schuif de batterij van boven naar beneden over de koppeling aan de patiëntunit. Druk daarna het systeem even aan. Het display laat nu vier cijfers zien.

Afkoppelen: schuif de batterij van beneden naar boven totdat deze los is van de patiëntunit. Het display laat nu geen cijfers meer zien.

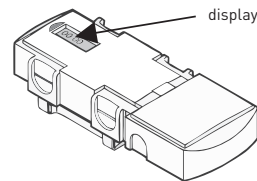

2. Als de batterij goed is aangesloten, hoort u ongeveer vijf seconden lang een pieptoon. Controleer daarna het display. Als het systeem goed werkt, ziet u vier cijfers en een knipperende punt.

Meer informatie over Ossatec®

OssaTechnics BV is specialist in non-invasieve fracture management en producent van de Botgroeistimulator. Het product voldoet aan de eisen van Medical Device Directive van de Europese Unie en ISO 13485. Hebt u vragen over de Botgroeistimulator of de producten en diensten van Ossatec®? Neem dan contact met ons op.

OSSATEC



 **OssaTechnics BV**
Postbus 572
5400 AN Uden
Nederland

T. +31 (0)413 26 52 81
E. info@ossatec.eu
I. www.ossatec.eu



OSSATEC

BOTGROEISTIMULATOR



GEBRUIKSAANWIJZING

voor de patiënt


Genezing van uw botbreuk met de Botgroeistimulator

U hebt een botbreuk en wilt maar één ding: zo snel mogelijk genezen. De Botgroeistimulator van Ossatec® ondersteunt het genezingsproces. U draagt het apparaat buiten uw lichaam op de plaats van de breuk. Door een pulserend elektromagnetisch veld aan te leggen op de breukvlakken stimuleert het systeem de aanmaak van botcellen.


Onderdelen

De Botgroeistimulator bestaat uit de volgende onderdelen:


Batterij

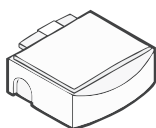


Platte spoel

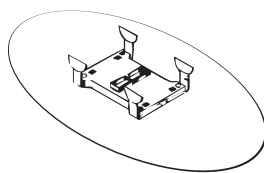


Patiëntunit

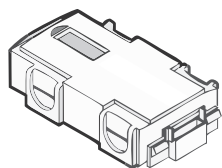

Platte spoel met draad

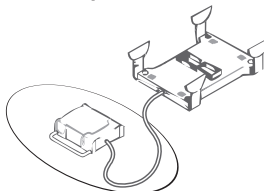


Oplader

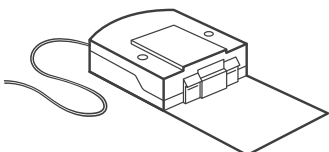

(Afhankelijk van de plaats van de breuk gebruikt u deze spoel. De patiëntunit draagt u dan op een plaats op het lichaam die voor u comfortabel is.)

Het complete systeem

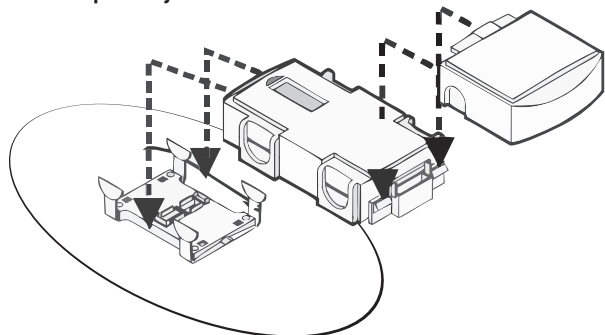

Belangrijke informatie

Lees onderstaande informatie goed door voordat u de behandeling start.

- U hebt zelf invloed op het succes van de behandeling met de Botgroeistimulator. Volg daarom de aanwijzingen op van de specialist, de gipsverbandmeester of de adviseur van Ossatec®.
- Een behandeling duurt minimaal 6 tot 8 uur per etmaal.
- Koppel de batterij van de Botgroeistimulator af als u het apparaat niet gebruikt.
- De Botgroeistimulator is spatwaterdicht. Draag het apparaat niet tijdens het douchen.
- Uw behandelend specialist of de gipsverbandmeester voert de controles uit van de behandeling. Neem voor de zekerheid alle onderdelen van de Botgroeistimulator mee naar de controles.
- Wordt er een röntgenfoto of MRI-scan van uw breuk gemaakt? Verwijder dan de Botgroeistimulator inclusief de spoel. Is de spoel bij u ingegipst? Meld dit dan voordat het gips wordt verwijderd. Zo voorkomt u dat de spoel beschadigd raakt door zagen en/of knippen.
- Ossatec® geeft u de Botgroeistimulator in bruikleen. We rekenen erop dat u verantwoord omgaat met het apparaat. Beschadigingen door nalatigheid kunnen we daarom bij u in rekening brengen.
- Wilt u de kunststof behuizing van de Botgroeistimulator reinigen? Gebruik daarvoor een vochtige, niet-pluizende doek.

Waarschuwing!

- Koppel de batterij van de Botgroeistimulator af in een ambulance of aan boord van een vliegtuig tijdens het opstijgen en landen. Doe dat ook op de spoedeisende hulp, de Intensive Care of een soortgelijke ziekenhuisafdeling.
- Zorg dat de Botgroeistimulator niet beschadigt en stel het apparaat niet bloot aan temperaturen hoger dan 45° Celsius of lager dan 0° Celsius.
- Dompel de Botgroeistimulator niet onder in water.

Patiëntunit

Hieronder leggen we uit welke informatie u kunt aflezen op het display van de patiëntunit. Uitleg over het aansluiten en vervangen van de batterij vindt u op de achterzijde van deze folder.



Let op: de cijfers op het display zijn slechts een voorbeeld. Nadat u de Botgroeistimulator hebt opgestart, toont het display bij u andere cijfers.

Meldingen in het display

Als het systeem goed werkt, ziet u vier cijfers op het display en twee punten. De eerste punt knippert en verspringt van plaats. De tweede punt staat op een vaste plek (tussen het derde en vierde cijfer) en heeft de functie van een komma. Het viercijferige getal geeft aan hoeveel uur uw breuk tot nu toe is behandeld met de Botgroeistimulator. Bijvoorbeeld: 1.23.4 betekent 123,4 uur.

Hoort u een waarschuwingssignaal?

Controleer dan het display:

U ziet geen cijfers = Voeding vervangen.

batt = Laad de batterij op.

FAIL of COIL = Controleer de verbinding tussen de patiëntunit en de spoel. Verwijder eerst de batterij. Koppel de patiëntunit af. Koppel vervolgens de patiëntunit weer aan en bevestig de batterij opnieuw. Toont het display dezelfde foutmelding? Neem dan contact op met Ossatec®.

LIFE = De patiëntunit heeft het einde van zijn levensduur bereikt.

Neem bij vragen of storingen contact op met Ossatec® via +31 (0)413 26 52 81.